


WOpticus – Einrichtung der Visiooffice Schnittstelle

Kurzanleitung

Konfigurationsdatei C:\Programme\WOpticus\WOpticus.ini im Editor öffnen.

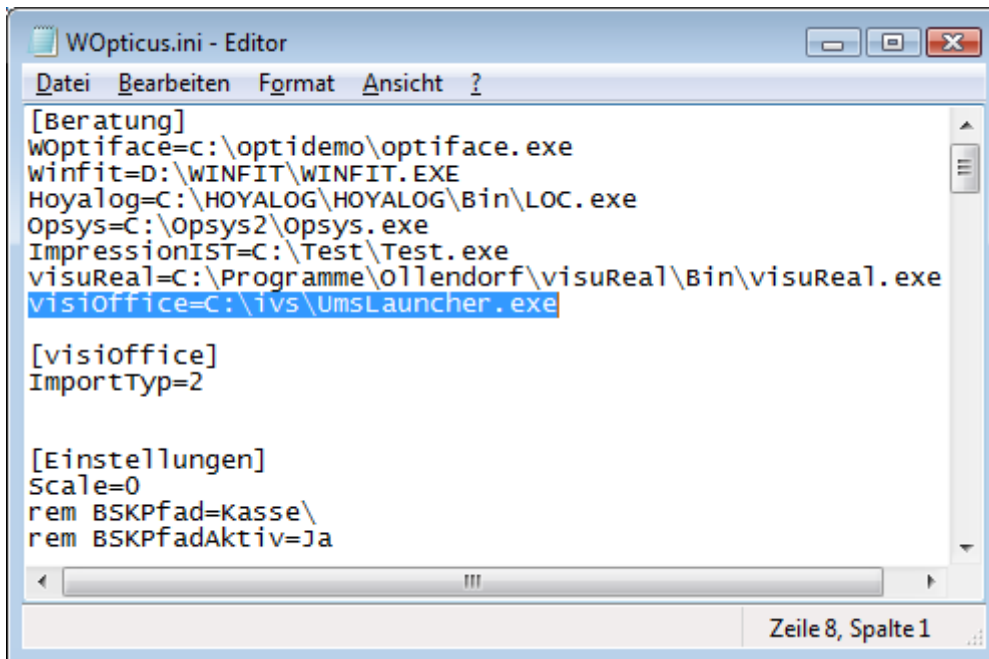

In der WOpticus.ini im Abschnitt Beratung folgenden Eintrag machen


```
Visiooffice=C:\ivs\UmsLauncher.exe
```

Wenn Visiooffice im Standardverzeichnis installiert wurde brauchen keine weiteren Einstellungen gemacht werden. Ansonsten gibt es noch folgende Einstellungen mit den Standardwerten, die im Abschnitt Visiooffice gemacht werden können.


```
[Visiooffice]
ImportTyp=2
Interface=C:\ivs\ivs.exe
Aufrufparameter=-pmsName WOpticus -pmsid
ExportPfad=C:\OMA\
ExportDatei=PMStoMeasure
ImportPfad=C:\OMA\
ImportDatei=MeasuretoPMS
LoeschImportDatei=Ja
Autobild=Ja
```

Wenn es nicht gewünscht wird automatisch das Bild aus Visiooffice zum Kunden zu speichern dann muss Autobild=Nein angegeben werden.

Schnelldurchlauf um im WOpticus die Schnittstelle zu testen.

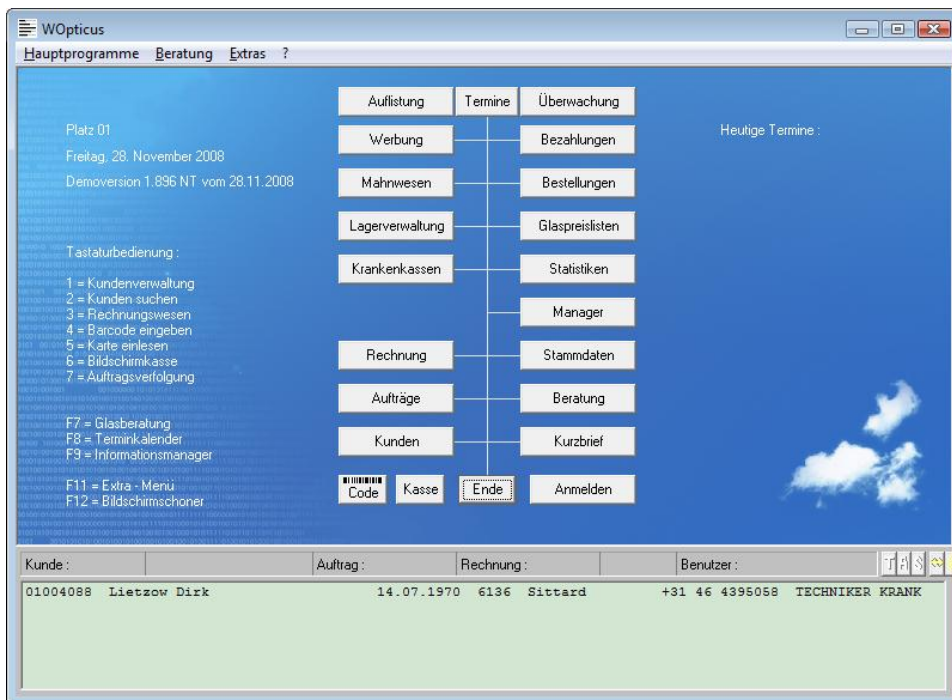

In der unteren Schnellstartliste den Kunden Lietzow Dirk mit Doppelclick auswählen damit die Kundenmaske erscheint .

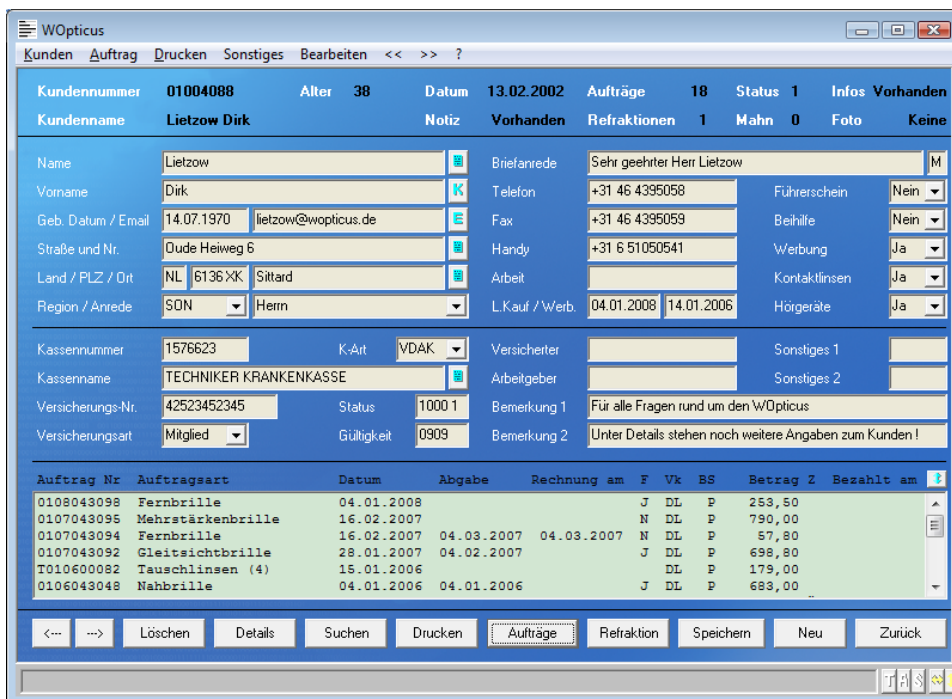

Es gibt viele Wege um einen neuen Auftrag anzulegen. Am schnellsten geht's durch drücken der Taste 1 auf der Tastatur um eine neue Fernbrille einzugeben.

Der WOpticus lässt sich noch wie in DOS-Zeiten mit der Tastatur bedienen.

WOpticus

Auftrag Eingabe Drucken Beratung Spezial Bearbeiten << >> ?

Kunde: **Lietzow Dirk** Kundennr.: **01004088** Lfnr.: **N / 14** Datum: **28.11.2008**

Auftragsart: **Fernbrille** Auftragsnr.: **Neueingabe** Status: **N** Rechnungsnummer: **08043098**

	±	SPH	±	CYL	Achse	Prisma	Basis	Pd	X	Y	Visus sc/cc
R	+	0,00		0,00	0			0,0			
L		0,00		0,00	0			0,0			

Lieferant Mat. Glasbezeichnung/Tönung/Entspiegelung/Sonstiges

R

L

Lieferant Kollekt. Modell Farbe Größe Büg L Arbeit Sonst./Etui

F

Refraktion vom Rezept

Bemerkung

Bestellt Glas Bestellt Fass Kontrolle Anzahlung Abgabe Rechnung Bezahlt

Verkauf Eingabe Kontrolle Abgabe Rechnungsbeitrag

Rest **0,00**

Bezeichnung Privat

Rechtes Glas 0,00

Linkes Glas 0,00

Fassung 0,00

Zuschlag rechts 0,00

Zuschlag links 0,00

Sonstiges rechts 0,00

Sonstiges links 0,00

Sonst./Etui 0,00

Refraktion 0,00

Versicherung 0,00

Gesamt 0,00

Mehrwertsteuer 19,0 % = 0,00 Zuzahl 0,00

Zahlart Rabatt 0,00

Referenz Anzahl 0,00

Speichern Neu Abbruch

Vorzeichen sphärisch rechts F2 = Übernahme

Refraktionswerte eingeben oder Datenübernahme auswählen. 

Oder F2 drücken und mit Pfeiltasten Übernahme aus Altaufträgen auswählen.

WOpticus

Auftragswerte

Kunde: **Lietzow Dirk** Kundennr.: **01004088** Auftragsnr.: **0108043098** Datum: **04.01.2008**

Auftragsart: **Fernbrille** Auftragsnr.: **Neueingabe** Fernbrille Lfnr.: **14**

	±	SPH	±	CYL	Achse	Prisma	Basis	Add	Pd
R	+	0,00		0,00	0			0,00	34,0
L		0,00		0,00	0			0,00	34,0

X Y Nth Visus sc cc Glaspreis

R

L

Lieferant **Seiko**

Glasbezeichnung/Entspiegelung/Tönung/Sonstiges

R **Polasol Hypal VC3** 65

L **Polasol Hypal VC3** 65

Fassung: **R0D ABC 4711 ABC 62-22**

Refraktionist: **10 Augenarzt** 01.01.2008

Bemerkung:


Was soll übernommen werden ? Refraktionswerte Gläser Preise

Rechts Fassung

Links Bemerkung Refraktionist


Übernahme Schließen

Der letzte Auftrag wird an der rechten Bildschirmhälfte angezeigt. Auf Übernahme klicken oder mit ENTER auswählen um die Refraktionsdaten in den Neuauftrag zu übernehmen.

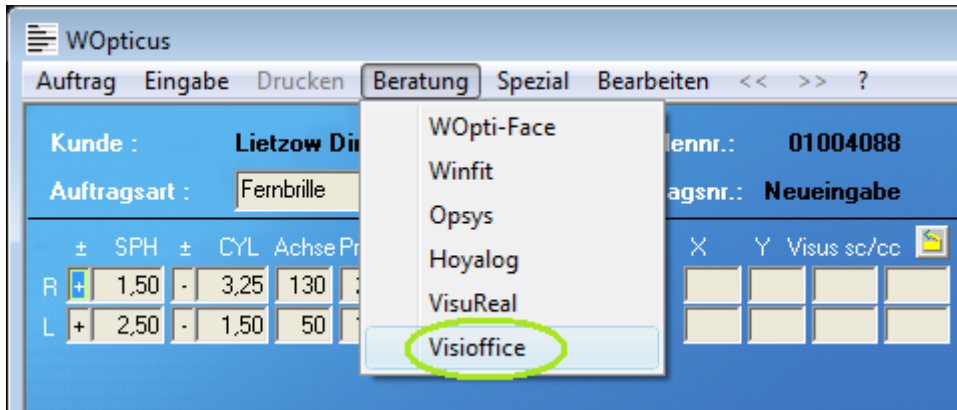


Aus dem Beratungsmenü den Eintrag Visiooffice wählen um die Schnittstelle zu starten.

WOpticus übergibt die Daten an Visiooffice und wartet darauf das die Messung beendet wird und Visiooffice die Messdaten exportiert.

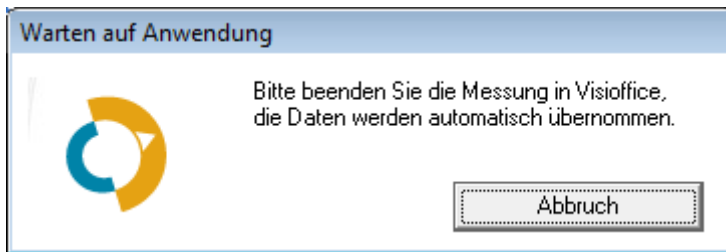


Visiooffice kommt in den Vordergrund und hat alle Kunden und Refraktionsdaten importiert. Neuen Kunden anlegen oder vorhandenen Kunden wählen und die Messung starten.


Beim Ergebnis muss in Visiooffice auf Schnittstelle gedrückt werden um die Daten an WOpticus zu übergeben.

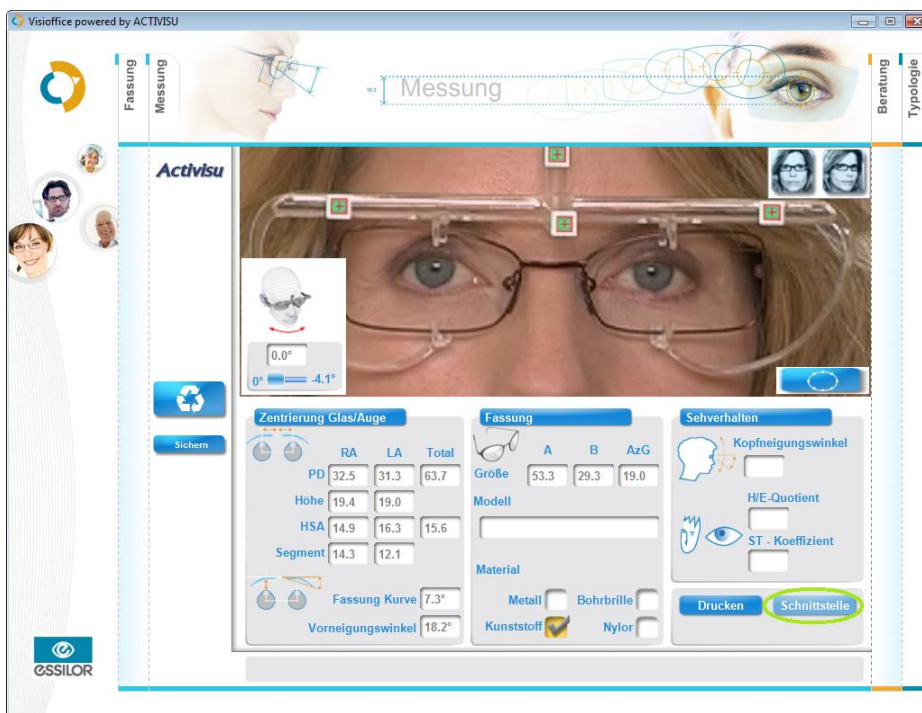


Visioffice springt in den Hintergrund und WOpticus importiert automatisch alle Daten in den Auftrag.

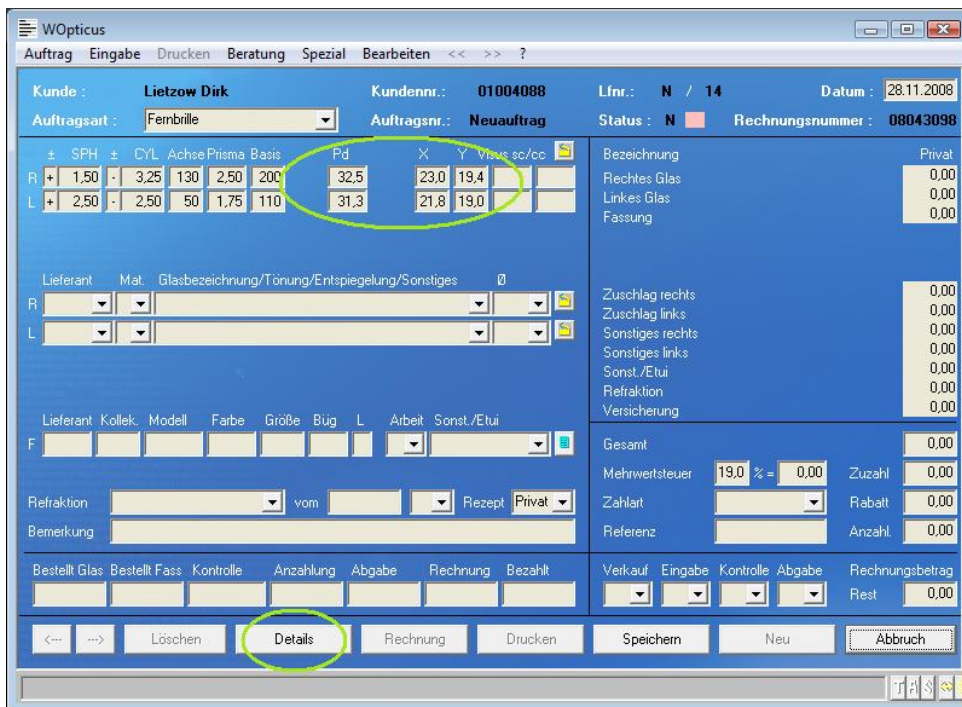

Klicken Sie auf Details um weitere Daten angezeigt zu bekommen.

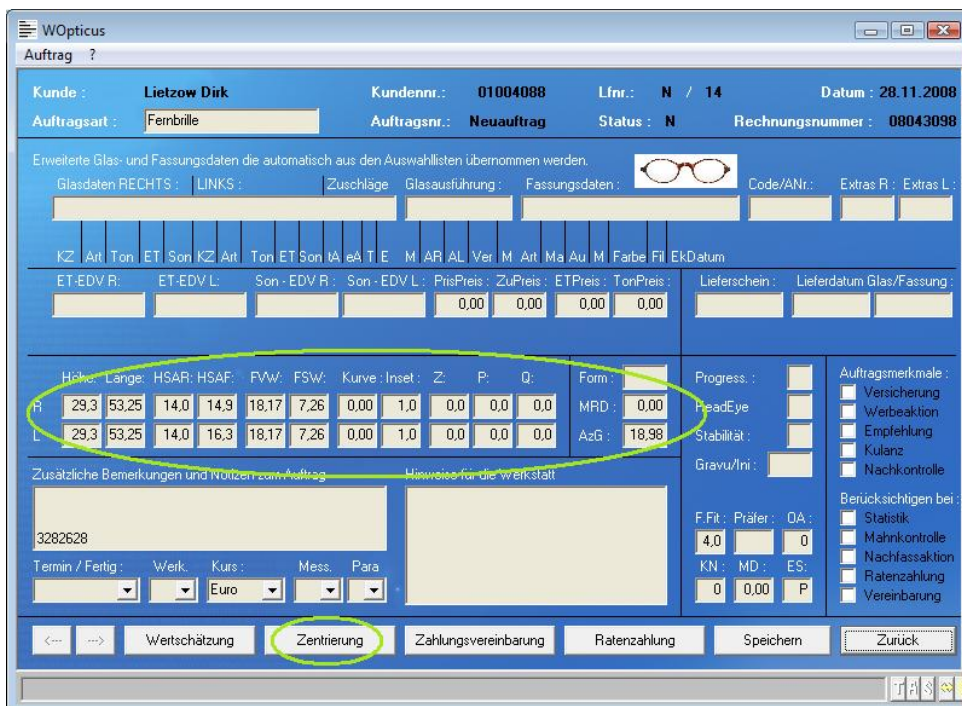

Klicken Sie auf Zentrierung um die Formdaten zu sehen.

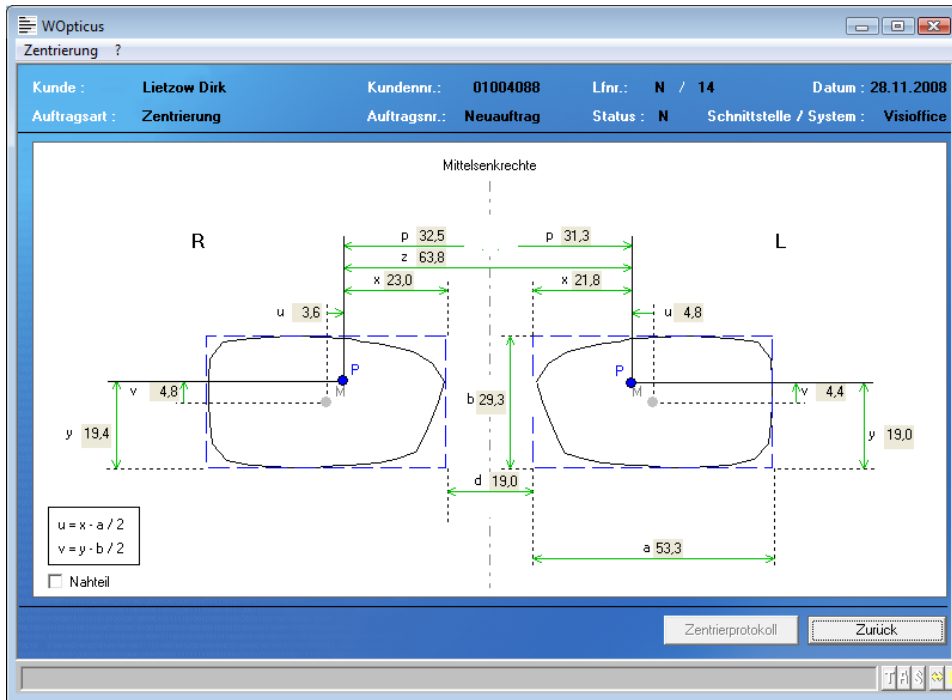


Es wird auch, wenn in Visiooffice gespeichert, das Kundenbild beim Kunden automatisch abgespeichert wenn noch kein Kundenbild vorhanden war. Diese Option kann in den Einstellungen (INI) geändert werden.


Manueller Schnittstellen-Import

In der Menüleiste unter Spezial oder über Datenübernahmebutton  Importieren auswählen.

Im Datenauswahldialog den Dateityp OMA-Dateien auswählen und eine Messung öffnen.

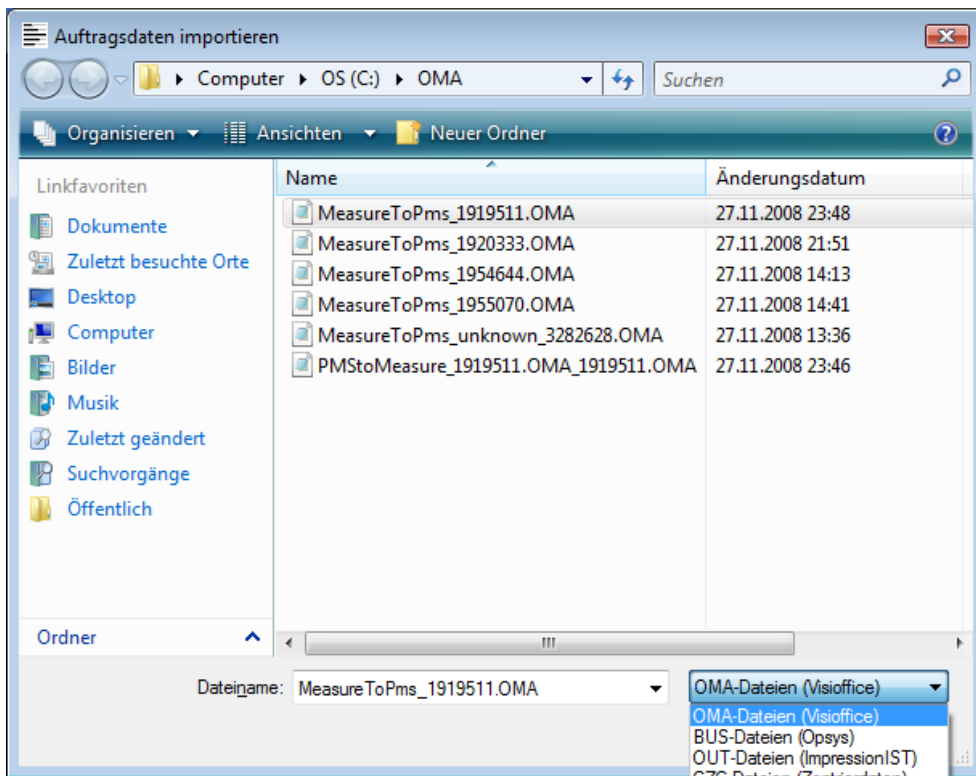

Import-Schnittstellendialog

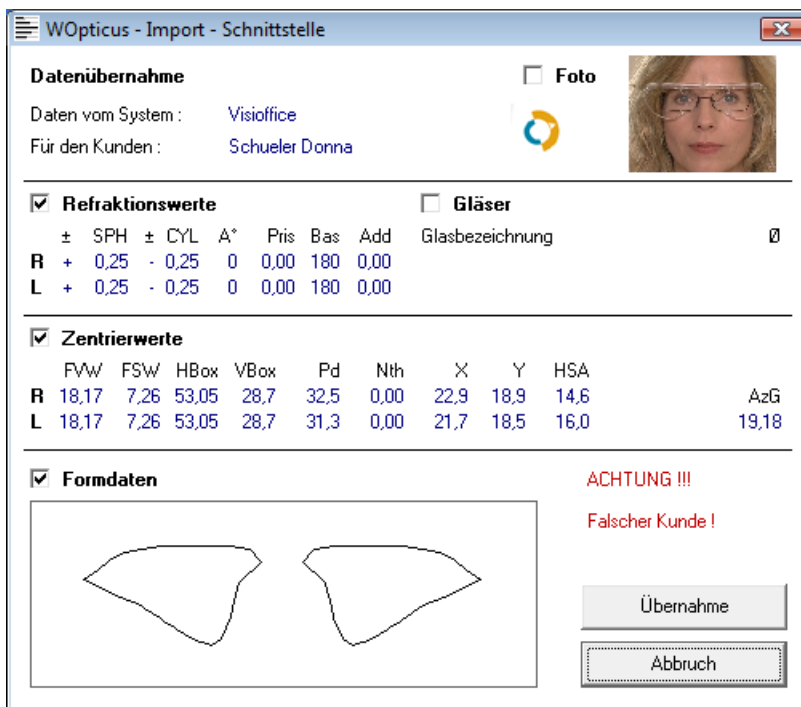

Die Daten werden angezeigt und man kann auswählen welche Bereiche in den aktuellen Auftrag übernommen werden sollen.